

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No

TF03-IFU03-06

Issue Date

03.06.2022

Revision No

01

Revision Date

11.08.2022



**SIMCOE AND ANTERIOR CHAMBER STABILIZATION
CANNULA**
**SIMCOE ve ANTERIOR CHAMBER STABİLİZASYON
KANÜLÜ**

Company Name

Şirket Adı

: MERAN TIP ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Company Representative

Firma temsilcisi

: Cemil BAYTAŞ / General Manager

Address

Adres

: Ferhatpaşa Mah. Arif Nihat Sok. A Blok No:4/1A
ÇATALCA/ İSTANBUL/TÜRKİYE

Phone

Telefon

: +90 216 557 8 755

Web

Web

: www.merantip.com

Product Structure and General Features:

Ürün Yapısı ve Genel Özellikler

The Simcoe and Anterior Chamber Stabilization Cannula is designed for the use in the cataract surgeries to maintain anterior chamber. Cannula tip is made of 304 Stainless Steel. The connection area at the back of the cannula is made of polycarbonate raw material. The products are available for single use and sterile. The cannulas to be used may differ depending on the operation area and the surgeon's choice. Models are available in various diameters and sizes in order to be suitable for every eye structure.

Simcoe ve Anterior Chamber Stabilizasyon Kanülü, ön kamarayı korumak için katarakt ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kanül ucu 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir. Kanülün arka kısmındaki bağlantı bölgesi polikarbonat hammaddeden üretilmiştir. Ürünler tek kullanımlık ve sterildir. Kullanılacak kanüller operasyon bölgesine ve cerrahın tercihine göre farklılık gösterebilir. Her göz yapısına uygun olması için çeşitli çap ve ebatlarda modeller mevcuttur.

Product Models:

Ürün Modeli:

Model and size information of the Simcoe and Anterior Chamber Stabilization Cannula products manufactured by us are shown in **TF03.TB.01 Annex-1 Product Models Table** with pictures.

Annex-1 Product Models Table with pictures.

*Tarafımızdan imal edilen Simcoe and Anterior Chamber Stabilizasyon ürünlerinin model ve ölçü bilgileri resimlerle **TF03.TB.01 Ek-1 Ürün Modelleri Tablosunda** gösterilmektedir.*

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

Intended Use:

Amaçlanan Kullanım:

Simcoe Cannulas are disposable and usually used in cataract surgeries. Anterior Chamber Stabilization Cannulas are using especially by Anterior Chamber Stabilization operations with phacoemulsification devices.

Simcoe Kanüller tek kullanımlıdır ve genellikle katarakt ameliyatlarında kullanılır. Ön Kamara Stabilizasyon Kanülleri özellikle fakoemülsifikasyon cihazları ile Ön Kamara Stabilizasyon operasyonlarında kullanılmaktadır.

Indications:

Endikasyonlar:

Simcoe Cannulas are used to provide a method for irrigation and aspiration without the need for a phaco machine. Anterior Chamber Stabilization Cannulas provide irrigation for chamber maintenance during anterior surgeries.

Simcoe Kanülleri, fako makinesine ihtiyaç duymadan irrigasyon ve aspirasyon yöntemi sağlamak için kullanılır. Ön Kamara Stabilizasyon Kanülleri, ön ameliyatlar sırasında oda bakımı için irrigasyon sağlar.

Patient Population:

Hasta Popülasyonu:

Patients with various eye conditions, especially cataracts.
Çeşitli göz rahatsızlıkları, özellikle katarakt olan hastalar.

Contraindications:

Kontrendikasyonlar:

It should not be used other than ophthalmic surgery.

Göz cerrahisi dışında kullanılmamalıdır.

It should not be used on infected eyes.

Enfekte gözlerde kullanılmamalıdır

Complications:

Komplikasyonlar:

If the tip of the Cannula is not sharp, it may damage the tissue of the eye.

Kanülün ucu keskin değilse göz dokusuna zarar verebilir

After operation mild chemosis and redness can occur.

Ameliyattan sonra hafif kemozis ve kızarıklık oluşabilir.

Vitreous hemorrhage can occur.

Vitreus kanaması meydana gelebilir.

Intraoperative serous occurrence.

İntraoperatif seröz oluşumu

Iris laceration can occur.

İris yırtılması meydana gelebilir.

Lens capsule tear can occur.

Lens kapsülü yırtılması meydana gelebilir.

Corneal edema can occur.

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

Kornea ödemi oluşabilir.

Hyphamea can occur.

Hifema oluşabilir.

Vitreous loss can occur.

Vitreus kaybı olabilir.

Retinal damage can occur.

Retina hasarı oluşabilir

Endothelium damage can occur.

Endotel hasarı oluşabilir.

Side Effects:

Yan Etkiler:

There are no known side effects of the product.

Cihazın bilinen bir yan etkisi yoktur.

Product Users:

Ürün Kullanıcıları:

The product should be used by specialist physicians who have completed the necessary medical training. Users must have operational experience.

Ürün gerekli tıp eğitimini tamamlamış uzman hekimler tarafından kullanılmalıdır.

Kullanıcılar operasyonel deneyime sahip olmalıdır.

Instruction for Use:

Kullanım Talimatı:

Simcoe and Anterior Chamber are restricted for use by surgeons trained in ophthalmic surgery.

Lasik Kanüllerin kullanımı, oftalmik cerrahi konusunda eğitimli cerrahlar tarafından kısıtlanmıştır.

➤ The cannulas should be opened from the marked are without disruption of the sterility.

Kanüller sterilitiyi bozmadan işaretli yerlerden açılmalıdır.

➤ Cannula should be connected to the Equipment by a sterile person according to usage of the product.

Kanül, ürünün kullanımına göre steril bir kişi tarafından ekipmana bağlanmalıdır.

➤ The cannulas are applied in anterior chamber of eye for irrigation and aspiration purposes.

Kanüller gözün ön kamarasına irrigasyon ve aspirasyon amacıyla uygulanır.

➤ Dispose of used products in accordance with established hospital protocol for hazardous waste.

Kullanılmış ürünleri, tehlikeli atıklar için belirlenmiş hastane protokolüne uygun olarak atın.

Factors That Can Affect the Success of The Operation:

Operasyonun Başarısını Etkileyebilecek Faktörler

- The user's experience and experience in the operation,
Kullanıcının operasyondaki deneyimi
- Product selection in suitable type and size for the patient to be applied,
Uygulanacak hastaya uygun tip ve ebatta ürün seçimi,
- Eye structure of the patient,
Hastanın göz yapısı,

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

- Failure of the patient to have the necessary controls after the operation.
Hastanın operasyon sonrası gerekli kontrolleri yaptıramaması.

Sterility/Sterilization Method:**Sterilite/Sterilizasyon Yöntemi:**

The products are sterilized with Ethylene Oxide and presented to the user as sterile.
Ürünler Etilen Oksit ile sterilize edilerek steril olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

Single Use / Reusability Status:**Tek Kullanımlık / Yeniden Kullanılabilirlik Durumu:**

The products are for single use only. There is absolutely no reusability.
Ürünler tek kullanımlıktır. Tekrar kullanılabilirliği kesinlikle yoktur.

Product Storage and Shipping Conditions**Ürün Saklama ve Nakliye Koşulları:**

Protect the product against direct sunlight during shipment and storage.

Ürünü nakliye ve depolama sırasında doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.

Keep the product dry in any environment.

Ürünü her ortamda kuru tutun.

Store the products between 5 ° C and 35 ° C temperature and maximum 70% RH humidity.

Ürünleri 5°C ile 35°C sıcaklık ve maksimum %70 RH nem arasında saklayınız.

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

Warning and Precautions

Uyarı ve Önlemler:



Warning and Precautions **Uyarı ve Önlemler**



- Do not use products with damaged packaging. Please send the damaged products to our company.
Ambalajı hasarlı ürünleri kullanmayınız. Lütfen hasarlı ürünleri firmamıza gönderiniz.
- In order for the operation to be performed safely and effectively, the user should consider the surgical technique part specified in this user manual.
Operasyonun güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için kullanıcı bu kullanım kılavuzunda belirtilen cerrahi teknik kısmını dikkate almalıdır.
- Single use product; Do not reuse products. The product used in a patient should never be used on another patient, even if it is used for a short time.
Tek kullanımlık ürün; Ürünleri tekrar kullanmayın. Bir hastada kullanılan ürün, kısa süreli de olsa başka bir hastada kesinlikle kullanılmamalıdır.
- The product is packaged sterile. Do not sterilize the product.
Ürün steril olarak paketlenmiştir. Ürünü steril etmeyin.
- Professionals should use the product.
Profesyoneller ürünü kullanmalıdır.
- Do not use the expired products.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.
- Products should not use for purposes other than specified in this user manual.
Ürünler, bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır.
- Pay attention to markings on the product labels.
Ürün etiketlerindeki işaretlere dikkat ediniz.

Medical Equipment Used with Products:

Medical Equipment Used with Products:

The products are used with injectors during surgery.
Ürünler operasyondaki enjektörlü olarak kullanılmaktadır

Accessory:

Aksesuar:

The product does not have any accessories.
Üründe herhangi bir aksesuar bulunmamaktadır.

Shelf Life:

Raf Ömrü:

In line with the stability studies carried out in independent laboratories, the product shelf life was determined as 4 years.
Bağımsız laboratuvarlarda yapılan stabilite çalışmaları doğrultusunda ürün raf ömrü 4 yıl olarak belirlenmiştir.

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

Packaging, Labeling and Handling:

Packaging material are manufactured according to EN ISO 11607-1 and EN 868-6 standard, tear, puncture and high resistance to liquids, which maintains sterility is the long packaging material. It sealed with heat cut in desired dimensions. Leak-proof barrier allows the product to remain sterile.

Ambalaj malzemeleri EN ISO 11607-1 ve EN 868-6 standardına göre üretilmiş, yırtılma, delinme ve sıvılara karşı yüksek dirençli, sterilitesini koruyan uzun ambalaj malzemesidir. İstenilen ölçülerde ısıl kesim ile mühürlenir. Sızdırmaz bariyer, ürünün steril kalmasını sağlar.



User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No

TF03-IFU03-06

Issue Date

03.06.2022

Revision No


01

Revision Date

11.08.2022

The packaging sample of our products is as seen in the photos below.

Ürünlerimizin ambalaj örneği aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibidir.

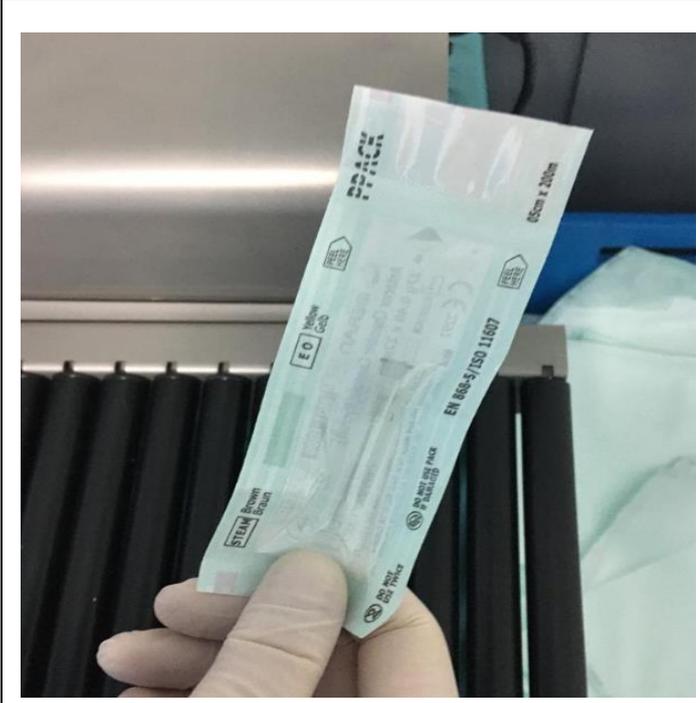

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No

TF03-IFU03-06

Issue Date

03.06.2022

Revision No

01

Revision Date

11.08.2022

Symbols Prepared According to EN 15223-1 Standard and Their Meanings

EN 15223-1 Standardına Göre Hazırlanan Semboller ve Anlamları

Internal Labels:

İç Etiketler:

1	2	3	4		
	Product Name/Model				
5	6	7	8		
			TF03.LB01/R02/05.11.2021		
9	10	11	12	13	14
1 5					
	MERAN TIP ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ Address: Ferhatpaşa Mah. Arif Nihat Sok. A Blok No:4/1A ÇATALCA/ İSTANBUL Phone : +90 216 557 8 755 Web: www.merantip.com				

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

Symbols and Description	
1	Company logo <i>Şirket logosu</i>
2	Product Name <i>Ürün adı</i>
3	Notified Body Number <i>Onaylanmış Kuruluş Numarası</i>
4	Should Be Used By An Expert <i>Bir Uzman Tarafından Kullanılmalıdır</i>
5	Sterilized with Ethylene Oxide. <i>Etilen Oksit ile steril edilmiştir.</i>
6	Lot Number <i>Lot Numarası</i>
7	Reference Number <i>Referans Numarası</i>
8	Label Information <i>Etiket Bilgileri</i>
9	Single Use <i>Tek kullanımlık</i>
10	Do Not Sterilize The Second Time <i>İkinci kez steril etmeyin</i>
11	Expiration Date <i>Son kullanma tarihi</i>
12	Barcode Number <i>Barkod Numarası</i>
13	Production Date <i>Üretim Tarihi</i>
14	Do Not Use if the Package is Damaged <i>Paket Hasarlıysa Kullanmayın</i>
15	Manufacturer Information <i>Üretici Bilgileri</i>

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

External Labels:

Dış Etiketler:

1	2	3	4			
	Product Name/Model <i>Ürün İsmi/Model</i>					
5	6	7	8			
			TF03.LBXX/R01/23.09.2020			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19			
20			21			
	mdi Europa GmbH Address: Langenhagener Str. 71 / 30855 Langenhagen / Germany Phone: +49 511 39089530 Web: https://mdi-europa.com/			MERAN TIP ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ Address: Ferhatpaşa Mah. Arif Nihat Sok. A Blok No:4/1A ÇATALCA/ İSTANBUL Phone : +90 216 557 8 755 Web: www.merantip.com		

User Manual



Kullanım Kılavuzu

Document No

Doküman No
TF03-IFU03-06

Issue Date
03.06.2022

Revision No
01

Revision Date
11.08.2022

Symbols and Description <i>Semboller ve Açıklama</i>	
1	Company logo <i>Şirket logosu</i>
2	Product Name <i>Ürün adı</i>
3	Notified Body Number <i>Onaylanmış Kuruluş Numarası</i>
4	See User Manual <i>Kullanım Kılavuzuna bakın</i>
5	Should Be Used By An Expert <i>Bir Uzman Tarafından Kullanılmalıdır</i>
6	Lot Number <i>Lot Numarası</i>
7	Production Date <i>Üretim Tarihi</i>
8	Label Information <i>Etiket Bilgileri</i>
9	Sterilized with Ethylene Oxide. <i>Etilen Oksit ile steril edilmiştir.</i>
10	Single Use <i>Tek kullanımlık</i>
11	Do Not Sterilize The Second Time <i>İkinci kez steril etmeyin</i>
12	Do Not Expose to Direct Sunlight <i>Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın</i>
13	Keep Away From Contact With Water <i>Su ile Temas Etmekten Uzak Durun</i>
14	Keep at the Specified Temperature Range <i>Belirtilen Sıcaklık Aralığında Tutun</i>
15	Reference Number <i>Referans Numarası</i>
16	Barcode Number <i>Barkod Numarası</i>
17	Do Not Use if the Package is Damaged <i>Paket Hasarlıysa Kullanmayın</i>
18	Expiration Date <i>Son kullanma tarihi</i>
19	Keep at the Specified Humidity Range <i>Belirtilen Nem Aralığında Tutun</i>
20	EU Representative Information <i>AB Temsilcisi Bilgileri</i>
21	Manufacturer Information <i>Üretici Bilgileri</i>